

γ-氨基丁酸(GABA)含量试剂盒说明书

(BN72132 微板法 96 样)

一、产品简介:

4-氨基丁酸(GABA)广泛分布在动植物体中。在动物体内 GABA 几乎只存在于神经组织中。在植物中如豆属、参属、中草药等的种子、根茎和组织液中都含有 GABA, 且与植物的环境应激反应有关。

4-氨基丁酸(GABA)在碱性溶液中与次氯酸盐和苯酚反应生成蓝绿色物质,通过检测该有色物质在 645nm 波长处的值,即可得出样本中 GABA 的含量。

二、试剂盒的组分与配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 100mL×1 瓶	4℃保存	
试剂一	液体 4mL×1 瓶	4℃保存	
试剂二	液体 2mL×1 支	4℃保存	临用前取出 0.13mL 试剂二至一支
			新EP管中,再向其中加入1.87mL
			蒸馏水混匀做为试剂二使用(该
			液体一周内用完)。
试剂三	液体 10mL×1 瓶	4℃保存	
标准品	粉体 mg×1 支	4℃保存	若重新做标曲,则用到该试剂。

三、所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、可调式移液枪、水浴锅、离心机、研钵、蒸馏水。

四、γ-氨基丁酸(GABA)含量测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定,了解本批样品情况,熟悉实验流程,避免实验样本和试剂浪费!

1、样本制备:

① 组织样本: 称取约 0.1g 组织样本加入研钵中,加入 1mL 提取液,在冰上进行匀浆,12000rpm,4℃或室温离心 10min,取上清液待测。

【注】: 若增加样本量,可按照组织质量(g):提取液(mL)为1:5~10的比例进行提取。

② 细菌/细胞样本: 先收集细菌或细胞到离心管内,离心后弃上清;取约 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液,超声波破碎细菌或细胞(冰浴,功率 200W,超声 3s,间隔 10s,重复 30 次);12000rpm 4℃离心 10min,取上清,置冰上待测。

【注】: 若增加样本量,可按照细菌/细胞数量(104):提取液(mL)为500~1000:1的比例进行提取。

③ 液体样本: 澄清的液体样本直接测定, 若浑浊则离心后取上清检测。

2、上机检测:

- ① 酶标仪预热 30 min, 调节波长到 645 nm。
- ② 所有试剂解冻至室温(25℃)。则试剂一和二可按照 30:200 的比例预先配制成**混合液** (用多少配多少,现配现用),在 EP 管中依次加入:

试剂名称(μL)	测定管	空白管(仅做一次)			
样本	50				
蒸馏水		50			
混合液	230	230			
试剂三	100	100			
混匀,沸水浴(95-100℃)10min,冰浴至室温,若浑浊需					

本产品仅用于科研




12000rpm 离心 5min,取澄清的 200μL 至 96 孔板中,于 645nm 处读取各管的 A 值。ΔA=A 测定-A 空白。

- 【注】1.若测定管的 A 值大于 1,则需将样本进行稀释(用蒸馏水稀释),稀释倍数 D 需代入计算公式重新计算。
 - 2.若 \triangle A 值低于 0.01,则可增加样本取样量 W(如增至 0.2g)或增加样本加样量 V1(如由 50μ L 增至 100μ L,则混合液和试剂三均各自减少 25μ L),则 W 和 V1 代入计算公式重新计算。

五、结果计算:

1、标准曲线: y = 0.0576x - 0.0236,x 为标准品质量(μg), y 为吸光值ΔA。

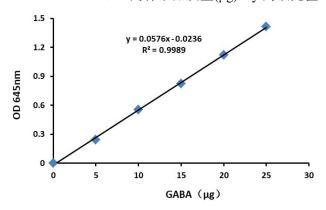

2、按样本质量计算:

GABA 含量(μ g/g 重量)=[(Δ A+0.0236)÷0.0576]÷(W×V1÷V)×D =347.2×(Δ A+0.0236)÷W×D

3、按细胞数量计算:

GABA 含量(μ g/ 10^4 cell)=[(Δ A+0.0236)÷0.0576]÷($500\times$ V1÷V)×D=0.7×(Δ A+0.0236)×D

4、液体中 GABA 含量计算:

GABA 含量(μ g/mL)=[(Δ A+0.0236)÷0.0576]÷V1×D=347.2×(Δ A+0.0236)×D

V---提取液体积, 1mL;

V1---样本加入体积, 0.05mL;

D---稀释倍数,未稀释即为1;

W---样本取样质量, g;

500---细胞数量,万。

附:标准曲线制作过程:

- 1 标准品母液(5mg/mL):标准品临用前甩几下使粉体落入底部,再加2mL蒸馏水溶解(两天内用完)。
- 2 把母液用蒸馏水稀释成以下浓度梯度的标准品: 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 mg/mL。也可根据实际样本来调整标准品浓度。
- 3 按照测定管的加样体系操作,根据结果即可制作标准曲线。