

Tannin content Kit

单宁含量试剂盒说明书

货号:BN72179| 方法: 可见分光法 | 规格: 48 样

一、产品简介:

单宁是一类水溶性、分子量在 500-3000 Da 之间的酚类化合物。在植物界中广泛分布,是一种重要的次级代谢产物,也是除木质素以外含量最多的一类植物酚类物质,具有抗氧、保湿、防腐等作用。

单宁类化合物在碱性溶液中,将磷钼酸还原成蓝色化合物,于 650nm 处测定吸光值,蓝色的深浅程度与单宁含量成正比。

二、试剂盒组分与配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
试剂一	液体 8mL×1 瓶	4℃避光保存	
试剂二	液体 12mL×1 瓶	4℃保存	
标准品	粉剂 mg×1 支	4℃保存	若重新做标曲,则用到该试剂

三、所需的仪器和用品:

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿(光径 1cm)、台式离心机、水浴锅、可调式移液器、研钵、冰和蒸馏水。

四、单宁含量的测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定,了解本批样品情况,熟悉实验流程,避免实验样本和试剂浪费!

1、样本制备:

① 组织样本:

称取约 0.1g 组织(水分充足的样本可取 0.5g),加入 1mL 蒸馏水,充分匀浆后转移到 EP 管中,80℃水浴提取 1h,12000rpm,4℃离心 10min,取上清,置冰上待测。

【注】:若增加样本量,可按照组织质量(g):提取液体积(mL)为 1:5~10 的比例进行提取。

② 液体样品:

澄清的液体样本可直接检测;若浑浊可离心后取上清液检测。

2、上机检测:

① 可见分光光度计预热 30min 以上,调节波长至 650nm,蒸馏水调零。


② 在 EP 管依次加入:

试剂名称(μL)	测定管	空白管(仅做一次)
样本	40	
蒸馏水	520	560
试剂一	160	160
试剂二	240	240
充分混匀,室温静置 30min,取全部液体至 1 mL 玻璃比色皿中,于 650nm 处读取吸光值 A, $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{空白}}$ 。		

注意:本操作流程适用于绝大多数常规样本检测,实验条件可根据实际样本状态适度微调;针对特殊类型样本,我司技术支持可提供专属优化建议。

五、结果计算：

1、标准曲线方程为 $y=1.7343x + 0.0038$ ；x 为标准品浓度（mg/mL），y 为 ΔA 。

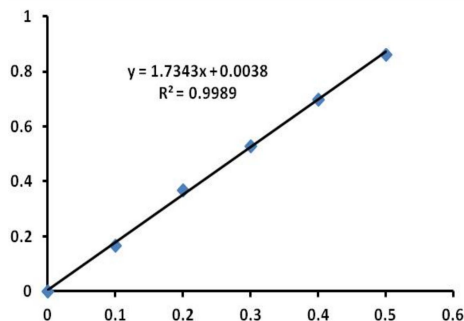

标准曲线示意图

说明：标准曲线由标准品测定获得，具体制作方法详见随货说明书或咨询技术支持。

2、按样本重量计算：

$$\begin{aligned} \text{单宁含量(mg/g 重量)} &= [(\Delta A - 0.0038) \div 1.7343 \times V1] \div (W \times V1 \div V) \times D \\ &= 0.577 \times (\Delta A - 0.0038) \div W \times D \end{aligned}$$

3、按液体体积计算：

$$\text{单宁含量(mg/mL 液体)} = [(\Delta A - 0.0038) \div 1.7343 \times V1] \div V1 \times D = 0.577 \times (\Delta A - 0.0038) \times D$$

V---提取液的总体积，1mL；

V1---加入样本体积，0.04mL；

W---样品质量，g；

D---稀释倍数，未稀释即为1。