

Soil Arginase Activity Assay Kit

土壤精氨酸脱氨酶活性测定试剂盒说明书

货号: BN72535 | 方法: 微板法 | 规格: 48 样

一、产品简介:

氮素是限制植物生长发育的主要营养元素之一, 土壤氮素是植物氮素营养的主要来源。其中土壤精氨酸脱氨酶也与土壤中氮转化有着密切关系。

本试剂盒利用精氨酸脱氨酶水解精氨酸生成 $\text{NH}_3\text{-N}$, 该产物在强碱性介质中与次氯酸盐和苯酚反应, 生成水溶性染料靛酚蓝, 通过检测生成的有色物质在630nm的最大光吸收峰, 进而得出土壤精氨酸脱氨酶活力大小。

二、试剂盒组分与配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
试剂一	粉剂 mg×2 瓶	4℃保存	临用前每瓶加入 18mL 蒸馏水, 充分溶解备用, 用不完的试剂仍 4℃保存;
试剂二	液体 60mL×1 瓶	4℃保存	
试剂三	液体 6mL×1 瓶	4℃保存	避光保存。
试剂四	液体 3mL×1 瓶	4℃保存	
试剂五	A: 液体 3.5mL×2 瓶 B: 液体 μL ×1 支	4℃保存	临用前取 30 μL 的 B 液进一瓶 A 液中, 混匀后作为试剂五使用。混匀后的试剂五一周内用完。
标准品	液体 1 mL×1 支	4℃保存	若重新做标曲, 则用到该试剂。

三、所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、水浴锅或恒温培养箱、离心机、可调式移液器、蒸馏水。

四、土壤精氨酸脱氨酶活性测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品情况, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

1、样本的制备:

取新鲜土样风干或者 37 度烘箱风干, 先粗研磨, 过 40 目筛网, 备用。

2、上机检测:

① 培养: 取 EP 管依次加入:

试剂名称 (μL)	测定管	对照管
土样(g)	0.5	0.5
试剂一	600	
蒸馏水		600
混匀, 放入 37℃水浴锅或恒温培养箱中孵育 3 小时		
试剂二	600	600
震荡提取 30min, 8000rpm, 25℃离心 5min, 取上清液。		

② 酶标仪预热 30min 以上, 调节波长至 630nm。


③ 显色反应：在 96 孔板中依次加入：

试剂名称 (μL)	测定管	对照管
上清液	15	15
蒸馏水	45	45
试剂三	60	60
试剂四	30	30
试剂五	60	60
混匀，37°C放置 20min 后，于 630nm 读取吸光值 A， $\Delta A = A_{\text{测定管}} - A_{\text{对照管}}$ （每个样本做一个自身对照）。		

注意：本操作流程适用于绝大多数常规样本检测，实验条件可根据实际样本状态适度微调；
针对特殊类型样本，我司技术支持可提供专属优化建议。

五、结果计算：

1、标准曲线： $y = 5.0935x - 0.0031$ ；x 为标准品质量 (μg)，y 为吸光值 ΔA 。

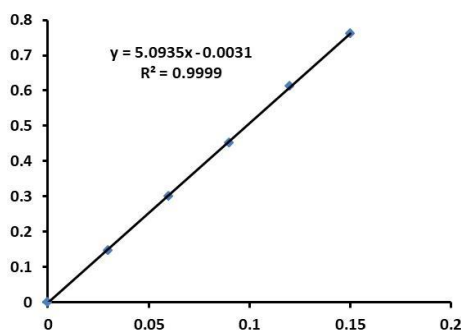

标准曲线示意图

说明：标准曲线由标准品测定获得，具体制作方法详见随货说明书或咨询技术支持。

2、土壤酶活定义：每天每克土样中产生 1μg 的 $\text{NH}_3\text{-N}$ 定义为一个酶活力单位。

$$\begin{aligned} \text{土壤精氨酸脱氨酶活力}(\mu\text{g/d/g 土样}) &= (\Delta A + 0.0031) \div 5.0935 \times (V \div V1) \div W \div T \\ &= 125.7 \times (\Delta A + 0.0031) \div W \end{aligned}$$

V—反应总体积，1200μL；

V1—显色反应中上清液体积，15μL；

T—反应时间，3h=1/8d；

W—土壤样本实际取样质量，g。